
Liite 6.2.2

Minray


Intraoraali röntgen laitteiden QA


- huone 1 ja huone 2 tehdään erikseen: 1 x/ 6kk

MEDNIEMI

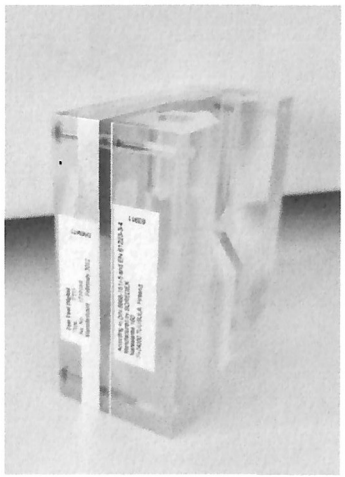



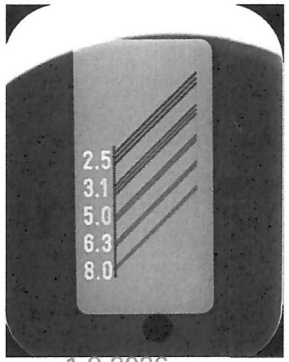

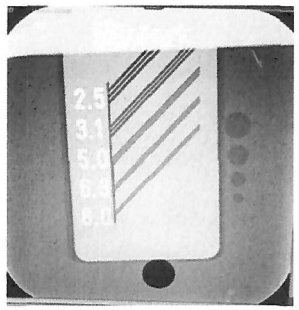

1. Minray intraoraali röntgen laitteisto löytyy molemmista hoitohuoneista
    - Testikappale Test Tool Digital, Type: TTD, Ser No: 1210164 säilytetään OPTG huoneessa, kuvanlukijan alla

2. Kuvataan, Testipotilas Tauno pot nro 7, alaincisiivin kuvausohjelmalla

3. Kuvaputki kiinni testikappaleeseen, kuvalevyke pohjassa testikappaleen aukossa

4. Laadunvalvontakuvaus on hyväksytty kun röntgen kuvassa näkyy 4 palloa ja toiseksi pienimmät viivat erottuvat toisistaan.