## Välinehuollon laadunvarmennus, ylläpitotehtävät ja huoltotoimenpiteet

1. **Laadunvarmennus – läpäistävä 1x/vko**
   1. Autoklaavin Vacum/ Vuototesti ja Helixtesti maantai aamuisin ja keskellä päivää
   2. Ultraäänen foliotesti
   3. Desinfektorin pesuohjelma 3 testi
2. **Ylläpito**
   1. Autoklaavin kammio tulee pyyhkiä joka aamu (kun vielä kylmä) A12T – kerää öljyä
   2. Autoklaavin vesisuodatinsihti tulee avata ja puhdistaa nöyhdästä
   3. Desinfektorin tulee laittaa suolaa ja puhdistaa clean ohjelmalla
3. **Huoltotoimenpiteet**
   1. Pääveden karkeavesisuodattimien vaihto
   2. Autoklaavin omien vesisuodattimien vaihto
   3. Desinfektorin lapojen ja suodattimien puhdistus

MEDNIEMI
Din tandläkare • Sinun Hammaslääkärisi

64

## Joka laitteella on laadunvalvontatestit - kirjataan seinällä olevaan taulukkoon

MEDNIEMI

| | | | |
|---|---|---|---|
| UÄ | Foliotesti | Viikoittain | Perforoiduttava käytetyssä ajassa |
| Desinfektori | Pesutesti P3 | Viikoittain | Väriläiskän on kadottava kokonaan |
| Melag ja Euronda | Vuototesti | Viikoittainen | Melag alle 1, Euronda ok |
| | Helix testi | Viikoittainen | Liuskan oltava tumma |
| | Itiötesti | Vuosittainen | Raportti Kaikomed |
| Lääkejääkaappi | Lämpötilan kirjaus | Viikoittainen | Kirjataan seinälle |
| Sidexis 2D ja 3D röntgen | Laadunvalvontakuvat omilla testikappaleilla | Kuukausittain | Mapitetaan |
| Röntgen kuvakkeet | Kuvakkeiden virheettömyys | Puolivuosittain | Jäävät testipotilaalle Sidexikseen |

65

## Autoklaavi: Euronda
– tyhjiövuototesti

MEDNIEMI



1. Tehdään viikoittain
2. Autoklaavi ei saa olla päällä kauempaa kuin n. 3 min ennen testin tekoa = klaavin täytyy olla kylmä kun testi tehdään
3. Paina valikosta Vacuum: ohjelma kestää n. 20 min
4. Hyväksytty Vacuum testi on: "Ok" – kirjataan taulukkoon

66

## Autoklaavi: Euronda
– vedensuodattimien vaihto

MEDNIEMI






1. Laita laitteen oma vesihana kiinni – vaaksuorassa kiinni
2. Käytä vesisuodattimien irrottamisessa mustaa avausrengasta ja kierrä vasemmalle = myötäpäivään
3. Tyhjennä suodatinsäiliöt vedestä, heitä suodattimet roskikseen, pyyhi vesisäiliön pohjat puhtaaksi (hiekasta?), säästä suodattamia ympäröivät muoviholkit
4. Siirrä muoviholkit uusien suodatinpatruunoiden ympärille, tiputa ne suodatinsäiliöihin
5. Tarkista, että siniset tiivistysrenkaat ovat paikoillaan ja ehjät. Muutama ylimääräinen säästetty yläkulmakaappiin.
6. KIERRÄ VAIN KÄSIN SUODATINSÄILÖT PAIKOILLEEN!
7. Avaa vesihana
8. Melagin vesisuodatinpatruunat käyvät myös Euronidaan kunhan vaihdetaan niiden päähän sininen tiivistysrengas

67

## Autoklaavi: Euronda & Melag
– Helix testi – 1 x/ vko

MEDNIEMI

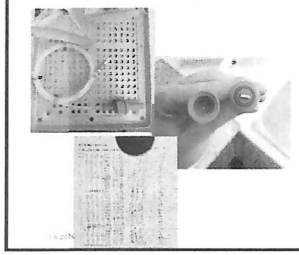

Helix-testi on kehitetty vaikeimmin steriloituvien onteloisten tuotteiden sterilointiprosessin valvontaan. Käytetään, kun steriloidaan onteloisia instrumentteja tai sekakuormia. B-luokan autoklaaveille.

Ohje:
Helix testi tehdään lämpimässä autoklaavissa (keskellä päivää), autoklaavin keskiosassa, instrumenttien joukossa.

Kertakäyttöinen Helix liuska (liila) taitetaan siniseen suljettuun, aukiruuvautuvan, letkun päähän. Hyväksytty testi on tasaisen vihreä. Testit dokumentoidaan ilmoitustaulun taulukkoon ja sieltä QA mappiin.

68

## Densinfektori Hydrim
- pesuaineen vaihto

MEDNIEMI











- Desinfektori pyytää lisää pesuainetta, ei käynnisty jollei saa lisää pesunestettä!
- Pesuneste on kuin viinileilissä. Avattava pahvi otettava kiinnityskohta esiin.
- Poista vaalea suojakorkki, ruuvaa laitteen musta kiinnitys kansi säiliöön.
- KATSO ETTEI JOHTO JÄÄ PURISTUKSIIN KUN LAITAT PAHVISÄILIÖN KONEESEEN!

69

## Desinfektori Hydrim
- pesutestin asettelu, hyväksytty pesutesti

MEDNIEMI








- Desinfektorin pesutesti tehdään P3 ohjelmalla 1x/ vko
- Pesutestiliuskalla oma pidike, joka laitetaan yläkoriin, pesukorien väliin, mahdollisimman lähelle pestäviä instrumentteja
- Pesutesti on hyväksytty kun fuksianpunainen "veritahra" on kokonaan hävinnyt


70

## Desinfektori Hydrim
- suolan lisääminen

MEDNIEMI



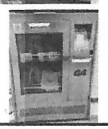

- Desinfektori pyytää suolan lisäämistä
- Alakori vedetään ulos
- Koneen lattiassa oikealla kierrekorkki
- Kierrä korkki pois, täytä kammio raesuolalla, kierrä korkki takaisin

71

## Paineilma

MEDNIEMI



- Paineilmalla ei saa puhaltaa ihoon – paine on niin suuri, että riski ihonalaisen ilmakuplan muodostumiseen on suuri!
- Paineilma on seinäkoukussa
- Paineilmalla kuivataan **vain desinfektorisyklin läpikäyneet** märät instrumentit kannellisen muhvilaatikon sisällä!
- Kuulosuojaimia tulee käyttää!

72