Hoitohuoneen puhdistusjärjestys

MEDNIEMI





Potilaan noustua tuolista:


1. **Ota potilaskohtaiset osat unitista potilastarjottimelle. Eli puustinkärki, käsikappaleet, imukärjet.**
2. **Vie tarjotin likaiselle puolelle ja heitä kertakäyttö materiaalit roskikseen tai viiltojätteeseen.**
3. **Heitä käsineet roskikseen, käsidesi käsiin ja uudet käsineet ja 2kpl alkoholillista pyyhintälappua, yksi molempiin käsiin ja valmiiksi sivuun 2kpl alkoholitonta pyyhintälappua. Pidä puhtaat käsineet pyyhintälapun suojassa. Pyyhi pinnat puhtausjärjestyksessä:**
    1. Käytetyt materiaalipakkaukset: pyyhi ja laita kaappiin.
    2. Työtasot, röntgenlaite, kahvat, valo
    3. Jokainen käsikappale, letku ja alla oleva silikonisuoja
    4. Silikonipeitteinen potilastarjotin
    5. Imut
    6. Ota alkoholiton pyyhintälappu ja pyyhi skanneri, näyttö ja tuoli

28.8.2026 5

5

Pintapyyhintäaineemme, desinfiointinesteemme

MEDNIEMI

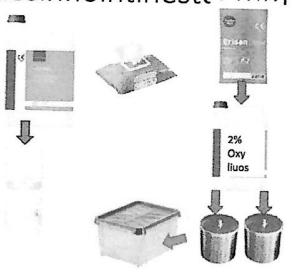

- Alkoholillinen pintapyyhintä: **Easydes** pesevä pintadesinfektioaine käyttövalmis, etanolipohjainen pesevä pintadesinfektioaine alkoholia kestäville pinnoille 5 litran kanisterissa. Aineen desinfektioaika on sen kuivumisaika.
- Alkoholiton pintapyyhintä: **Orbis Wet wipes sensitive** nopeasti tehoava desinfiointiaine. Orbis Orbi-Sept wet wipes sensitive liinat soveltuvat erityisesti herkkien pintojen pyyhintään. 20 x 30 cm kokoinen polyesteri-viskoosiliina on esikostutettu 22% propanolilla, jonka vuoksi desinfiointiaine on hyvin materiaalistayskyvyinen, sopii mm. akryylilasille, keinonahalle. Vaikutusaika on 1 min. Tutustu käyttöohjeeseen. Säilyy 28 päivää avaamisesta. Täyttää standardit: EN 13727, EN 1276 ja EN 13697, EN 13624, EN 1650, EN 14348, 14476, EN 16615. Adehyliton, etanoliton, lenoliton, dermatologisesti testattu.
- Pieninstrumenttien esiliotus: **Erisan Oxy+ desinfektioaine** Vetyperoksidiin ja peretikkahappoon perustuva desinfektioaine lääkinnällisten laitteiden ja välineiden puhdistukseen ja desinfektioon. Sopii myös herkille pinnoille ja materiaaleille. Granuloitu jauhe kätevässä 90 gramman kertapakkauksessa. Jauhe sekoitetaan lämpimään veteen. Liuos on käyttövalmista, kun jauhe on kokonaan liuennut. Laimennosuhde ja vaikutusaika riippuvat käyttötarkoituksesta. Koska aine on vetyperoksidin ja peretikkahapoon perustuvaa, on pussissa pieni reikä, joka estää pussin turpoamisen.


  Metalliluohja käytetään ilman kantta, käytyt poranterät omaan ja jauhehoitoviat omaan astiaansa. Kupit laitetaan sellaisinaan sä pesurin, n. 6min. Sen jälkeen desinfektorin ja autoklaaviin.

28.8.2026 6

6

Imudesinfiointimme

MEDNIEMI

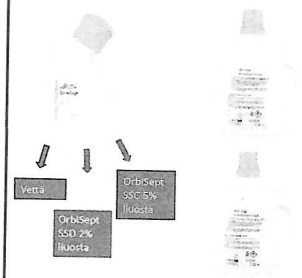


- Tärkeintä on juoksuttaa tarpeeksi vettä imuihin! Mikään desinfiointiaine ei riitä, jollei letkuissa kulje tarpeeksi vettä. Tätä varten on "sörsa" = Oro Cup.
- **Oro Cup pidetään aina puhtaana! Älä kytke likaisia imuholkkeja Oro Cuppiin!**
- Puhdista/ tyhjennä/ vaihda aamulla imusihdit!
- Aamuisin 2l vettä Öro Cupin kautta imuihin.
- Potilasvaihdoissa, eritoten veristen toimenpiteiden jälkeen, ime vettä imuihin kraanasta/ kertakäyttömukista.
- Lounastaukoa ennen/ alkaisin aamulla vesi-imun jälkeen: **2l** ime 1x/ vko 5% **OrbiSept SSC** teho puhdistus aine imuihin. Min vaikutus aika 30min, max vaikutus aika 2t.
- Muutoin **OrbiSept SSD 2%** päivän päätteeksi imuihin. **1l** OrbiSept SSD tehoimun pesu- ja desinfiointitiiviste Tehoimun puhdistus- ja desinfektiotiiviste. Laimenna 1-3% liuokseksi (1 litra vettä + 10-30 ml konsentraattia). Katso tarkemmat käyttöohjeet pakkauksesta. Orbi-Sept Absauganlagendesinfektion.

28.8.2026 7

7

Välinehuollon erot huone1 ja huone2

- Hygienistimme käyttävät nyt pakattuja instrumenttikasetteja. Steriilointipussin pohja jätetään instrumenttikasetin alle. Metallitarjottimet eivät ole enää käytössä huoneessa 2. Instrumenttikasetit kulkevat sellaisinaan sekä desinfektorin, että (pakattuina) autoklaavin läpi.
- Hygienistin kasetissa on tilaa 8 instrumentille – käytössä yleensä 5:
    - Peili
    - *lentaskumittari*
    - LM mes ja dist kyretti
    - Sirppi
- Vieläkin tärkeämpää pyyhkiä heti instrumentit kaikesta kiinnittyneestä liasta.
- Terotuksesta tulleet/ uudet instrumentit voidaan autoklavoida ryhmäpussittaen.

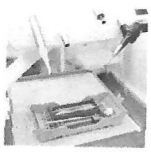

MEDNIEMI

18.8.2026 8

8