Autoklaavi: Euronda

– vedensuodattimien vaihto

MEDNIEMI





1. Laita laitteen oma vesihana kiinni – vaakasuorassa kiinni
2. Käytä vesisuodattimien irrottamisessa mustaa avausrengasta ja kierrä vasemmalle = myötäpäivään
3. Tyhjennä suodatinsäiliöt vedestä, heitä suodattimet roskikseen, pyyhi vesisäiliön pohjat puhtaaksi (niekasta?), säästä suodattamia ympäröivät muoviholkit
4. Siirrä muoviholkit uusien suodatinpatruunoiden ympärille, tiputa ne suodatinsäiliöihin
5. Tarkista, että siniset tiivistysrenkaat ovat paikoillaan ja ehjät. Muutama ylimääräinen säästetty yläkultmakaappiin.
6. KIERRÄ VAIN KÄSIN SUODATINSÄILÖT PAIKOILLEEN!
7. Avaa vesihana
8. Melagin vesisuodatinpatruunat käyvät myös Eurondaan kunhan vaihdetaan niiden päähän sininen tiivistysrengas

28.8.2026


29

25

Autoklaavi: Euronda & Melag

– Helix testi – 1 x/ vko

MEDNIEMI

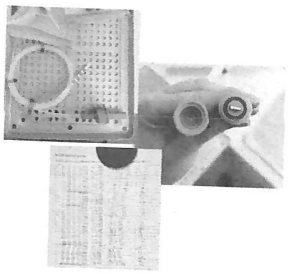

Helix-testi on kehitetty vaikeimmin steriloituvien onteloisten tuotteiden sterilointiprosessin valvontaan. Käytetään, kun steriloidaan onteloisia instrumentteja tai sekakuormia. B-luokan autoklaaveille.

Ohje:

Helix testi tehdään lämpimässä autoklaavissa (keskellä päivää), autoklaavin keskiosassa, instrumenttien joukossa.

Kertakäyttöinen Helix liuska (liila) taitetaan siniseen suljettuun, aukiruuvautuvan, letkun päähän. Hyväksytty testi on tasaisen vihreä. Testit dokumentoidaan ilmoitustaulun taulukkoon ja sieltä QA mappiin.

28.8.2026

26

26

Densinfektori Hydrim

- pesuaineen vaihto

MEDNIEMI



- Desinfektori pyytää pesuainetta, ei käynnisty jollei saa lisää pesunestettä!
- Pesuneste on kuin viinileilissä. Avattava pahvi otettava kiinnityskohta esiin.
- Poista vaalea suojakorkki, ruuvaa laitteen musta kiinnitys kansi säiliöön.
- KATSO ETTEI JOHTO JÄÄ PURISTUKSIIN KUN LAITAT PAHVISÄILIÖN KONEESEEN!

28.8.2026


27


27

Desinfektori Hydrim

- pesutestin asettelu, hyväksytty pesutesti

MEDNIEMI

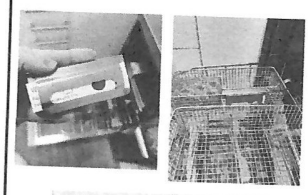

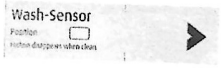

- Desinfektorin pesutesti tehdään P3 ohjelmalla 1x/ vko
- Pesutestiliuskalla oma pidike, joka laitetaan yläkoriin, pesukorien väliin, mahdollisimman lähelle pestäviä instrumentteja
- Pesutesti on hyväksytty kun fuksianpunainen "veritahra" on kokonaan hävinnyt

28.8.2026

28

28